


Je bénéficie d'oxygénothérapie

L'oxygénothérapie vise à fournir artificiellement de l'oxygène de façon à rétablir ou maintenir un taux normal d'oxygène dans le sang. L'oxygène peut être contenu dans une bouteille ou être produit dans un oxyconcentrateur.

OXYGÈNE GAZEUX (BOUTEILLE)

1. Lors de la 1^{ère} utilisation, vérifiez que le manomètre indique environ 200 bar

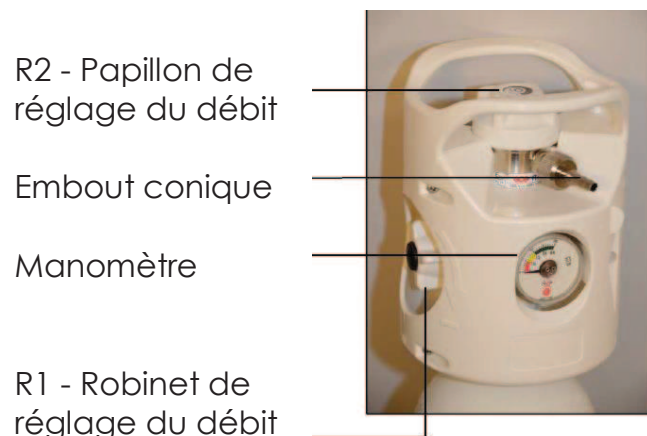

2. Connectez la canule nasale ou le masque sur l'embout conique

3. Ouvrez lentement la bouteille d'oxygène avec le robinet de réglage du débit R1 (vers le +)

4. Mettez les canules nasales ou le masque sur le visage

5. Réglez le débit en fonction de la prescription du médecin en tournant le papillon de réglage R2

6. A la fin du traitement, fermez les robinets de réglage R1 et R2.

Précautions d'utilisation :

(oxygène gazeux et oxyconcentrateur)

Evitez le contact entre l'oxygène et les corps gras (vaseline, crèmes grasses sur le visage) et les bombes aérosols : risque d'inflammation.

Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme (cuisine, cheminée,...) à moins de 2 mètres de la bouteille d'oxygène.


Ne tentez jamais de monter ou démonter l'oxyconcentrateur ou la bouteille d'oxygène.

OXYCONCENTRATEUR



1. Installez le système humidificateur si requis

2. Connectez les canules nasales ou le masque sur l'embout conique et placez-les sur le visage

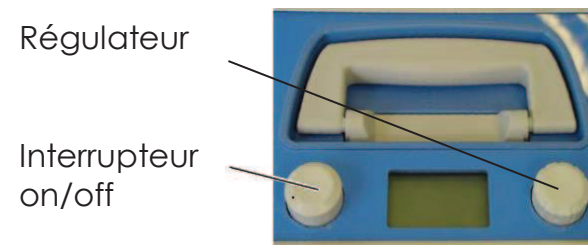

3. Allumez l'appareil

4. Réglez le débit d'oxygène selon la prescription du médecin. Pour changer le débit, il faut appuyer 2 secondes sur le régulateur puis le tourner jusqu'à la valeur prévue. Confirmez le réglage en appuyant sur le régulateur.

OXYCONCENTRATEUR PORTABLE



La batterie se recharge en maximum 4 heures lorsque l'oxyconcentrateur est branché sur secteur. Débranché, elle permet une autonomie de 2-4 heures.

Batterie restante

Régulation du débit

Bouton on/off

Embout conique



1. Connectez les canules nasales ou le masque sur l'embout conique et les placer sur le visage

2. Allumez l'appareil

3. Réglez le débit d'oxygène selon la prescription du médecin.

CONSEILS D'UTILISATION POUR LES INTERFACES PATIENT

Canules nasales (« lunettes ») :

1. Placez les 2 petits embouts dans les narines
2. Placez la tubulure derrière chaque oreille, les tuyaux se rejoignent sous le menton
3. Ajustez les lunettes sous le menton à l'aide de la bague en plastique



La **longueur du tuyau** de raccordement ne doit pas excéder 12-15 mètres

La personne peut **respirer par le nez ou la bouche** (il n'est pas nécessaire de respirer uniquement par le nez).

Masque :

Apposez le masque sur le nez et la bouche

Entretien :

(canules nasales et masque)

Nettoyez les **lunettes ou le masque** tous les jours : après l'avoir déconnecté, plongez le dans de l'eau chaude contenant du détergent, séchez-le ensuite. Changez les lunettes ou le masque minimum toutes les 2 semaines.

Nettoyez et désinfectez l'**humidificateur** (si requis) tous les jours.

Remplacer le **filtre à corps étranger** tous les mois.